




PHI Lines
 **RADHEX**
IMPLANTS

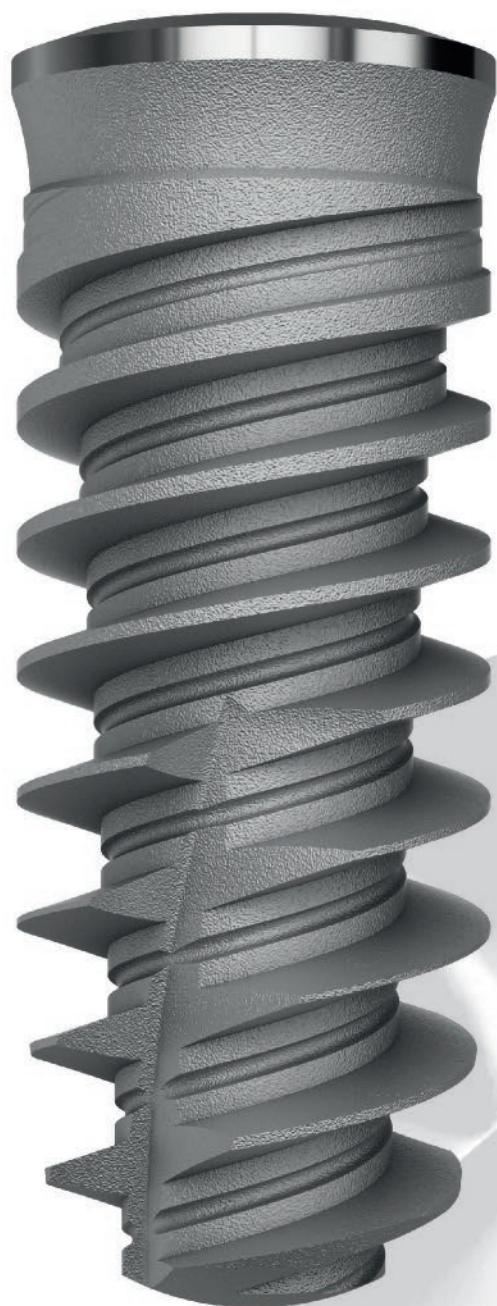

PHI Lines

CONECTIVIDAD:

IS = PHI350 = Plat. Hex. Interna Ø3.50 mm / Tipo Zimmer Tapped Screw Vent 3.5

IM = PHI450 = Plat. Hex. Interna Ø4.50 mm / Tipo Zimmer Tapped Screw Vent 4.5

En Radhex Implants® pensamos que un elevado standard de calidad y diseño en el producto, unidos a la practicidad que brinda una adecuada ergonomía de diseño, de la accesibilidad que otorga la economía, son nuestros principales baluartes de apoyo para el profesional en la búsqueda de la excelencia.

Es dentro de este espíritu, en el que se mueve cada elemento del diseño de nuestros productos, y en especial nuestra [línea PHI](#).

Un implante concebido para el profesional que prefiere los encastrados internos, con la eficiencia y seguridad que puede otorgar, la plataforma americana originariamente diseñada por el **Dr. Gerald Niznick**, seguramente la más difundida mundialmente como conexión interna hexagonal, que al mismo tiempo crea un seguro cierre de conexión de asiento cónico, que asegura la máxima reducción del GAP en la interconexión implante - aditamento

Un implante polivalente, siempre con la plataforma de la [línea PHI](#) Compatible en sus dos versiones de diámetro:

PHI 350: La conexión mas difundida, para implantes de diámetros de 3,50 mm hasta 4,00 mm.

PHI 450: Alta estabilidad de asiento protésico, para implantes de diámetro 4,50mm hasta 6,00 mm.

Composición: Fabricado en Titanio Puro Grado 4. Apto para toda situación clínica.

El sentido práctico, es la columna vertebral del Sistema Radhex Implants®.

PHI350: Implantes Plataforma Hexagonal Interna Ø 3.50.
Código de Conexión IS.


Diámetros y Longitudes Disponibles

SCALE 1.5:1

Ø 3.50



Ø 3.75

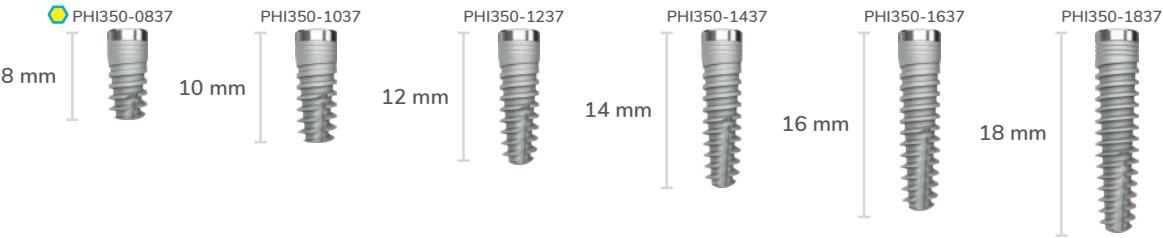

Ø 4.00



Short Implant

PHI 350 Type
RADHEX
IMPLANTS



PHI 450 Type
RADHEX
IMPLANTS




- Conexión Hexagonal Interna **PHI**.
- Tratamiento Superficial sustractivo Bone-link.
- Anillo cervical, con acabado superficial mecanizado 1 mm.
- Disponibilidad de Salto de plataforma, (Platform switching).
- Roscas de una Hélice, con perfil progresivo, Núcleo central cónico y perfil crestal cilíndrico.
- Frentes apicales de auto roscado de diseño recto.
- Indicado genéricamente para todo tipo de Huesos.
- Indicado especialmente para alta densidad ósea, (especial para tipo I y tipo II).
- Velocidad de fresado: 500 a 800 rpm.
- Velocidad de inserción: 50 rpm.
- Envase con doble vial de protección.
- Máxima protección y fácil manipulación.
- Incluye tapa de cierre.

PHI450: Implantes Plataforma Hexagonal Interna Ø 4.50.
Código de Conexión IM.

Diámetros y Longitudes Disponibles

SCALE 1.5:1


Ø 4.50

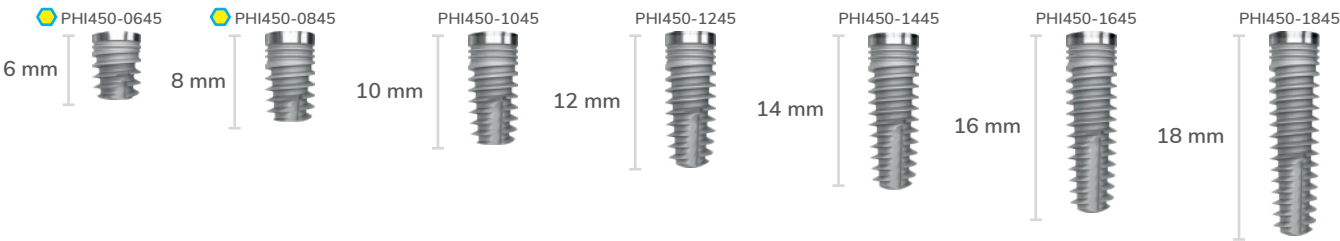

Ø 5.00



Ø 6.00

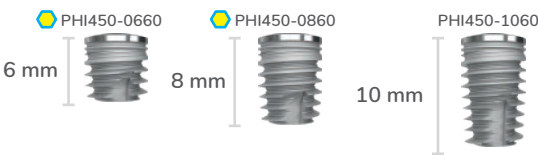



PHIA Lines

CONECTIVIDAD:

IS = PHI350 = Plat. Hex. Interna Ø3.50 mm / Tipo Zimmer Tappered Screw Vent 3.5

IM = PHI450 = Plat. Hex. Interna Ø4.50 mm / Tipo Zimmer Tappered Screw Vent 4.5

En Radhex Implants® pensamos que un sistema de implantes, debe proporcionar al profesional diferentes alternativas.

PHIA, es un implante con cuerpo concebido para la Alta Estabilidad, incluso en hueso de baja densidad y siempre, con la plataforma, de la **línea PHI** compatible.

Quienes conocen con profundidad la implantología, y gozan de experiencia, entienden las dificultades que pueden ofrecer, las diferentes situaciones topográficas y estructurales de los maxilares.

Por ello valoran especialmente un diseño que responda a situaciones límite, donde la Calidad del hueso, requiere diseños de alta estabilidad.

Es este el sentido conceptual al que responde la **línea PHIA**, un implante con cuerpo concebido para la Alta Estabilidad, incluso en huesos de baja densidad y siempre, con la plataforma, de la **línea PHI** compatible en sus dos versiones de diámetro:

PHIA 350: Máxima comodidad restaurativa, respondiendo a una línea completa de diámetros y longitudes, con una plataforma única, para implantes de diámetro 3,50 mm; 3,75 mm; 4,00 mm; 4,50 mm y 5,00mm.

PHIA 450: Alta estabilidad de asiento protésico, para implantes de diámetro 4,50mm; 5,00mm y 6,00 mm.

Composición: Fabricado en Titanio Puro Grado 4. Apto para toda situación, e indicado especialmente si hay poca densidad ósea, o topografía ósea irregular.


El sentido práctico, es la columna vertebral del Sistema Radhex Implants®

PHIA350: Implantes Plataforma Hexagonal Interna Active Ø 3.50.
Código de Conexión IS.


Diámetros y Longitudes Disponibles

SCALE 1.5:1


Ø 3.50

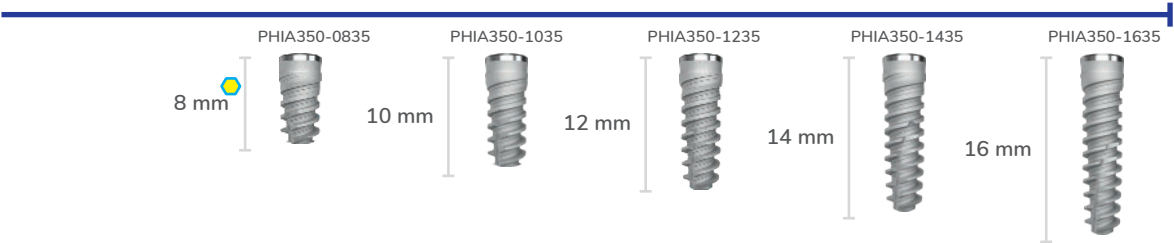


Ø 3.75

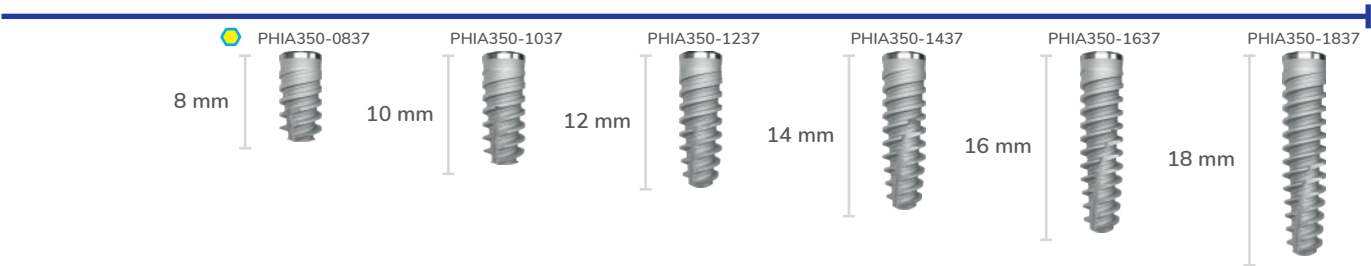


Ø 4.00

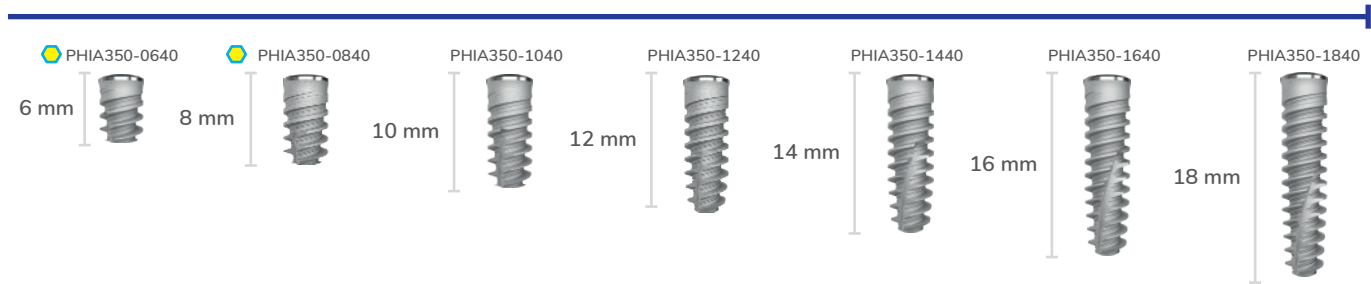

Ø 4.50

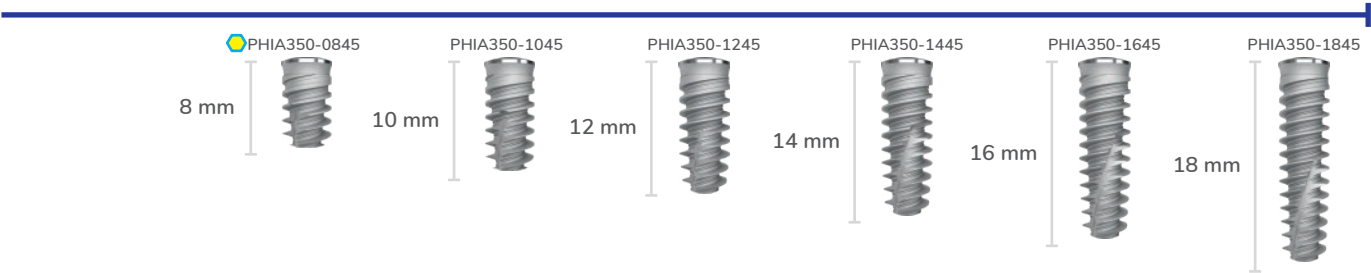


Ø 5.00

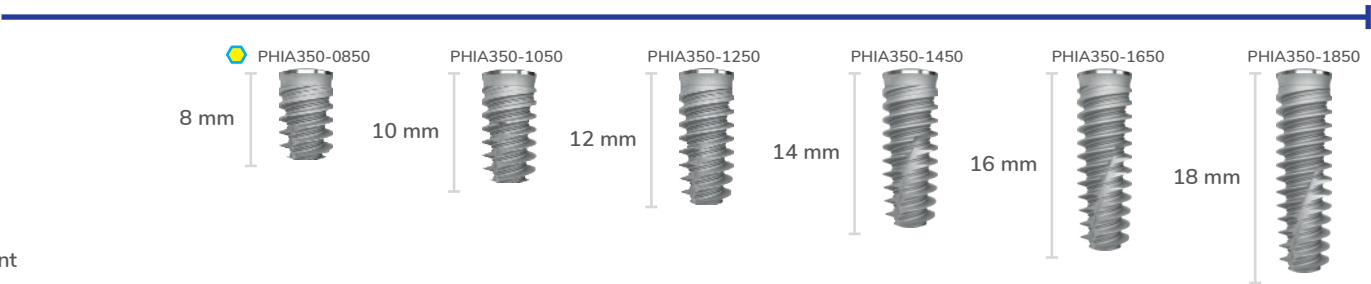

Short Implant

PHIA350 Type

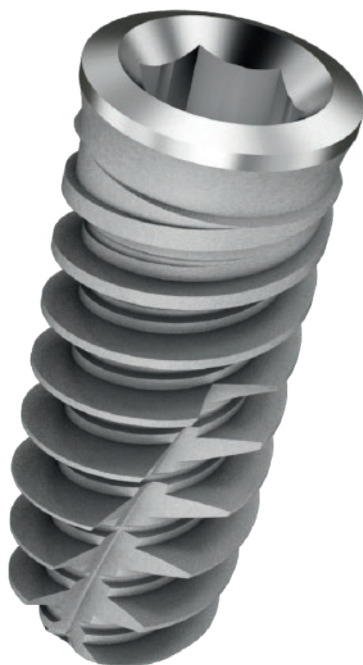

PHIA 450 Type




- Conexión Hexagonal Interna **PHI**.
- Tratamiento Superficial sustractivo Bone-link.
- Anillo cervical, con acabado superficial mecanizado 0,5 mm.
- Disponibilidad de Salto de plataforma, (Platform switching).
- Roscas de doble Hélice, con perfil progresivo, Núcleo central cónico y perfil crestal cilíndrico.
- Frentes apicales de auto roscado de diseño helicoidal.
- Indicado genéricamente para todo tipo de Huesos.
- Indicado especialmente donde se requiera alta estabilidad primaria, (especial para tipo III y tipo IV).
- Velocidad de fresado: 500 a 800 rpm.
- Velocidad de inserción: 25 rpm.
- Envase con doble vial de protección.
- Máxima protección y fácil manipulación.
- Incluye tapa de cierre.

PHIA450: Implantes Plataforma Hexagonal Interna Active Ø 4.50.
Código de Conexión IM.


Diámetros y Longitudes Disponibles

SCALE 1.5:1


Ø 4.50

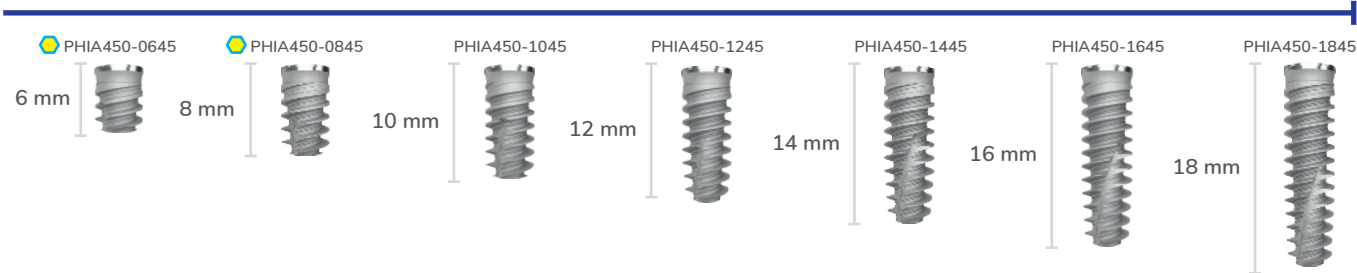

Ø5.00

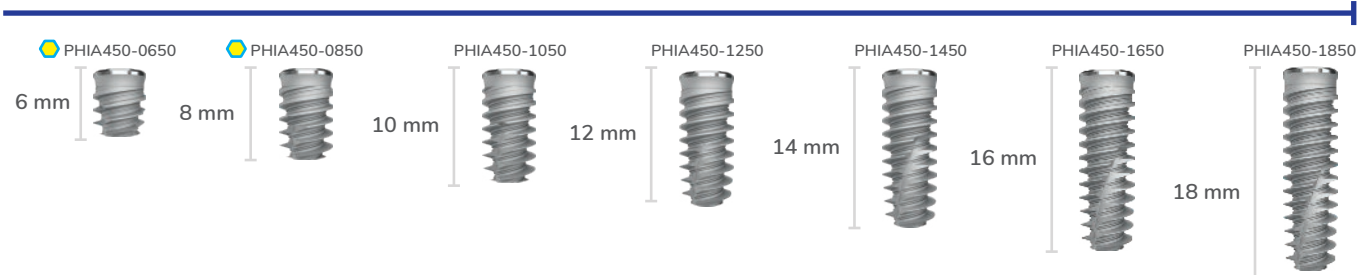

Ø6.00

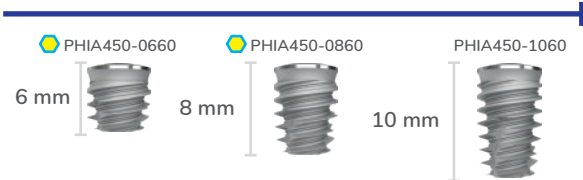

Short Implant

Implantología post exodoncia inmediata, con implantes PHI para Piezas 26 y 27


Descripción de Caso Clínico: Paciente de Sexo Femenino, 46 años, sin observaciones de importancia en estado de salud general, con lesiones de caries y afección periodontal en 26 y 27.
Se plantea solución Rehabilitación parcial Implanto soportada, con coronas ceramo metálicas, sobre 4 implantes de marca Radhex, modelo PHI.
* Imagen cedida, Gentileza de centro odontológico CDIH.




1- Previo al tratamiento



2- Colocación de Implantes

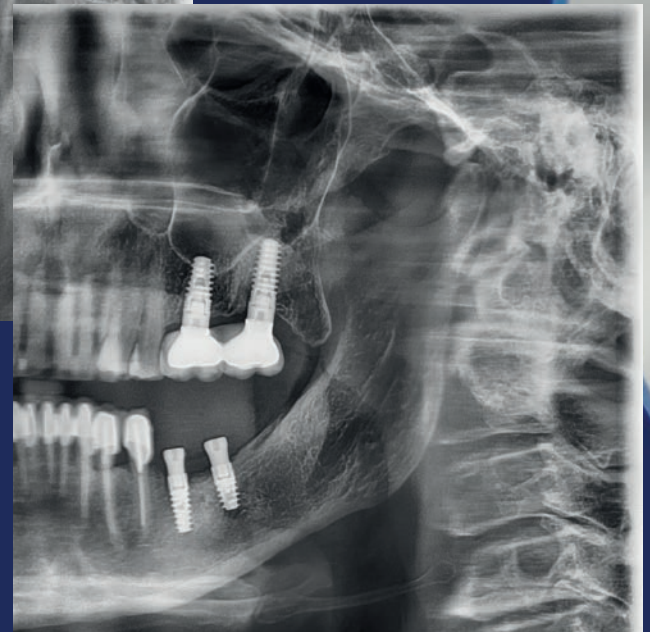

3- Restauraciones metalocerámicas

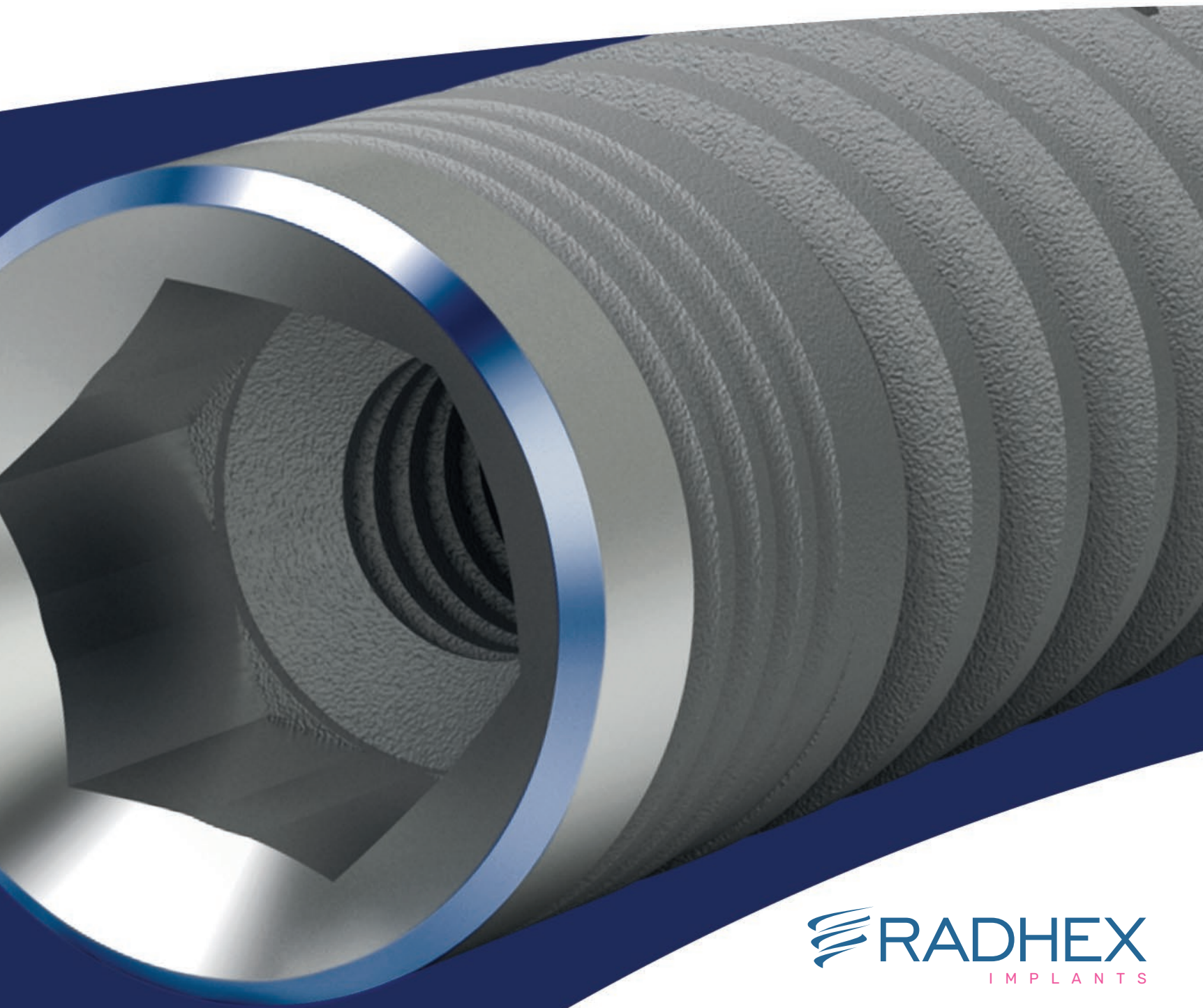

 **RADHEX**
IMPLANTS

Ed. 2024.03. Impreso en España. Reservados todos los derechos.

Este catálogo no sustituye a las Instrucciones de Uso (IFU).

Consulte la IFU vigente para obtener información completa sobre las indicaciones, la finalidad prevista, la población de pacientes objetivo, los usuarios previstos, las limitaciones de uso, las contraindicaciones, las advertencias, las precauciones, las declaraciones o reclamaciones clínicas y el procedimiento de uso.



comercial@radhex.es

900 350 450

www.radhex.es

Quality PHI



© RADHEX_IMPLANTS/RADHEX-IMPLANTS

